
Инструкции за употреба

387.365 Държач за оптически устройства \varnothing 10,0 и 4,0 мм, многоосев, за основна система SynFrame

Тези указания за употреба не са предназначени за разпространение в САЩ.

Инструкции за употреба

387.365 Държач за оптични устройства Ø 10,0 и 4,0 мм, многоосев, за основна система SynFrame

Моля, преди употреба, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, брошурата на Synthes "Важна информация" и съответните хирургични техники. Този продукт може да се употребява само от обучен медицински персонал.

Неспазването на тези инструкции за употреба може да доведе до повреда на продукта или оптиката и/или до нараняване на пациента.

Този продукт може да се употребява само за закрепване на оптични устройства с диаметър на оста 10,0 или 4,0 мм, тъй като удържащата сила и формата на челюстта са проектирани изключително за оптични устройства с такива диаметри.

Употребата на оптични устройства с други диаметри ще доведе до повреда, при това излагайки на опасност надеждното закрепване на оптиката.

Този продукт не се доставя стерилен и трябва да се почиства съгласно тези инструкции преди първата и всяка следваща употреба. За да избегнете повреда на закрепените оптични устройства, инструментът трябва да се проверява за дефекти и неизправна работа преди всяка употреба.

Материал(и)

Материал(и):	Стандарт(и):
Неръждаема стомана (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (Неръждаема стомана)	ASTM F 899/ASTM A 276
РА 66 (Полиамид)	DIN 7153-1
Алуминий (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Дезинфекция, почистване и стерилизация

След всяка употреба продуктът трябва да бъде щателно и правилно почистван.

1. Преди почистване разхлабете централната блокираща ръкохватка (вижте елемент 1 в илюстрацията) и всички блокиращи винтове.
2. Почистете повърхностите на продукта с меки почистващи препарати или дезинфектиращи средства, препоръчани за алуминиеви инструменти в брошурата на Synthes "Важна информация". Не потапяйте!
3. Стерилизирайте съгласно брошурата на Synthes "Важна информация".

Специални указания за работа

Разположете държача за оптични устройства Ø 10,0 и 4,0 мм върху носещия пръстен 387.336 SynFrame

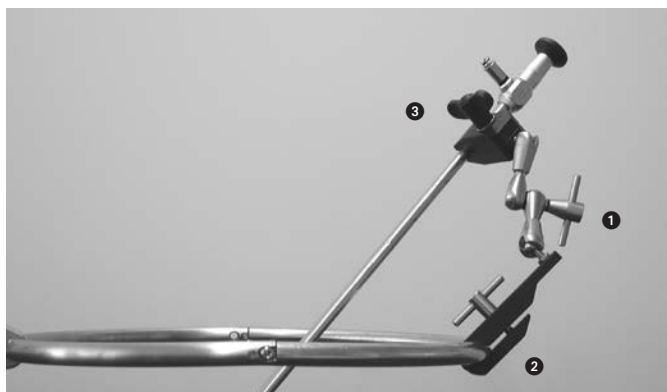

1. За да разхлабите шарнирното съединение, завъртете централната блокираща ръкохватка (1) в посока, обратна на движението на часовниковата стрелка, толкова, колкото е възможно.
2. Затегнете скобата (2) към носещия пръстен SynFrame, като държите въртящото се рамо извън пръстена (вижте илюстрацията). Това ще държи задържащото рамо извън оперативното поле.
3. Въведете и закрепете оптичното устройство в съответстващата 10,0 или 4,0 мм челюст на черната скоба (3) на държача. Уверете се, че
 - оптичните устройства прилягат точно в челюстта за 10,0 или 4,0 мм на черната скоба и
 - черната скоба е закрепена към оста на оптичното устройство, доколкото е възможно в посоката на свързването на камерата.
4. Разположете оптичното устройство в желаната позиция над оперативното поле и го закрепете в това положение чрез затягане на централна блокираща ръкохватка (1) в посоката на движение на часовниковата стрелка.

Забележки:

- Винаги разхлабвайте централната блокираща ръкохватка (1), когато позиционирате отново оптичното устройство. Оптичното устройство може да се повреди (огъне), ако се премества без отваряне на шарнирното съединение.
- Държачът може да се повреди, ако се приложи прекомерна сила при затягането на винтовете.

Забележка:

Държачът за оптични устройства Ø 10,0 и 4,0 мм е съставна част от основната система SynFrame 187.310 и следователно е предмет на съответните условия, специфицирани в хирургичната техника за SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com