
Návod k použití

387.365 Držák pro optiku Ø 10,0 a 4,0 mm, polyaxiální, pro základní systém SynFrame

Tento návod k použití není určen k
distribuci ve Spojených státech.

Návod k použití

387.365 Držák pro optiku Ø 10,0 a 4,0 mm, polyaxiální, pro základní systém SynFrame
Před použitím si přečtěte tento návod k použití, příručku „Důležité informace“ společnosti Synthes a odpovídající popis chirurgických technik. Tento výrobek mohou používat pouze školení zdravotničtí pracovníci.

Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k poškození výrobku nebo optiky a poranění pacienta.

Tento produkt se může používat pouze pro držení optiky s průměrem dřívku 10,0 nebo 4,0 mm, protože přídržná síla a tvar čelistí jsou navrženy pro optiku s těmito průměry.

Použití optiky s odlišnými průměry způsobí poškození a tedy ohrozí bezpečné udržení optiky.

Výrobek se nedodává sterilní a měly být před prvním a každým dalším použitím vyčištěn v souladu s tímto návodem. Aby se zabránilo poškození držené optiky, měl by být nástroj před každým použitím zkontrolován, zda není poškozený nebo porouchaný.

Materiál(y)

Materiál(y):	Norma (normy):
Nerezová ocel (SSt)	ASTM F 899 / DIN 17441 / ASTM A 276 / ISO 7153-1
Nitronic 60 (Nerezová ocel)	ASTM F 899 / ASTM A 276
PA 66 (polyamid)	DIN 7153-1
Hliník (Al)	ASTM B 221M / ISO DIN 573


Desinfekce, čištění a sterilizace

Výrobek musí být po každém použití důkladně a správně vyčištěn.

1. Před čištěním povolte centrální pojistnou rukojeť (viz položka 1 na obrázku) a všechny pojistné šrouby.
2. Vyčistěte povrchy výrobku jemnými čistícími nebo dezinfekčními prostředky doporučenými pro hliníkové nástroje v příručce společnosti Synthes „Důležité informace“. Neponořujte!
3. Sterilizujte podle pokynů v příručce společnosti Synthes „Důležité informace“.

Speciální operační pokyny

Umístění držáku pro optiku Ø 10,0 a 4,0 mm na přídržný kroužek SynFrame 387.336

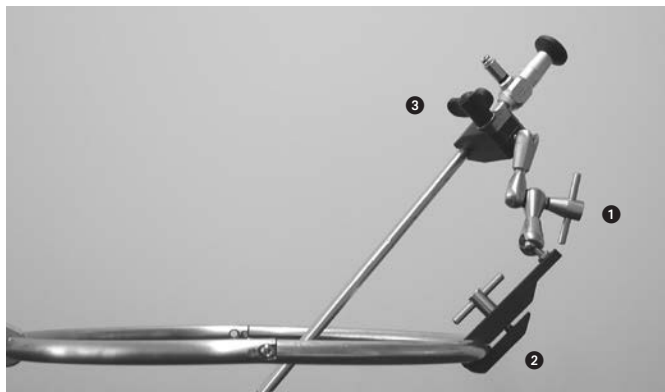

1. Pro uvolnění kloubového ramena otočte středovou pojistnou rukojeť (1) proti směru hodinových ručiček, co nejdále je možné.
2. Zajistěte svorku (2) na přídržný kroužek SynFrame, přičemž udržte otočné rameno vně kroužku (viz obrázek). Tím se udržuje přídržné rameno vně operačního pole.
3. Vložte a zajistěte optiku v odpovídající čelisti o průměru 10,0 nebo 4,0 mm na černé svorce (3) držáku. Zkontrolujte, že
 - optika přesně drží v čelisti o průměru 10,0 nebo 4,0 mm černé svorky a
 - svorka je zajištěna k dřívku optiky, co nejdále je možné ve směru nástavce kamery.
4. Umístěte optiku do požadované pozice nad operační pole a zajistěte v této pozici utažením centrální pojistné rukojeti (1) po směru hodinových ručiček.

Poznámky:

- Když měníte polohu optiky, vždy povolte středovou pojistnou rukojeť (1). Optika může být poškozena (ohnuta), pokud se pohne bez otevření spojovacího ramene.
- Držák může být poškozen, pokud působí nadměrná síla při utahování šroubů.

Poznámka:

Držák pro optiku o Ø 10,0 a 4,0 mm je částí základního systému SynFrame 187.310, a proto podléhá podmínkám specifikovaným v chirurgické technice pro SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com