

---

# Brugsanvisning

## 387.365 Optikholder Ø 10,0 og 4,0 mm, polyaksial, til SynFrame-grundsystem

Brugsanvisningen er ikke beregnet til  
distribuering i USA.

# Brugsanvisning

387.365 Optikholder Ø 10,0 og 4,0 mm, polyaksial, til SynFrame-grundsystem  
Læs denne brugsanvisning, Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger" og de tilhørende anvisninger i kirurgiske teknikker nøje igennem før brug. Dette produkt må kun bruges af uddannet sundhedspersonale.

Hvis denne brugsanvisning ikke følges, kan det medføre beskadigelse af produktet eller optikken, der skal holdes, og/eller patientskade.

Dette produkt må kun anvendes til at holde optikker med en skaftdiameter på 10,0 eller 4,0 mm, idet holdestykken og kæbernes udformning kun er designet til optikker med disse diametre.

Brug af optikker med andre diametre vil forårsage beskadigelse, hvilket vil være til fare for sikker fastholdelse af optikken.

Produktet leveres ikke sterilt og skal rengøres i henhold til disse anvisninger inden første og hver efterfølgende brug. For at undgå beskadigelse af optikkerne, der skal holdes, skal instrumentet kontrolleres for defekter og fejlfunktion før hver brug.

## Materiale(r)

Materiale(r):	Standard(er):
Rustfrit stål (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (rustfrit stål)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (polyamid)	DIN 7153-1
Aluminium (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


## Desinficering, rengøring og sterilisering

Produktet skal rengøres omhyggeligt og korrekt efter hver brug.

1. Løsn det midterste låsehåndtag (se del 1 på billedet) og alle låseskruer inden rengøring.
2. Rengør produktets overflader med milde vaskemidler eller desinficeringsmidler anbefalet til instrumenter af aluminium i Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger".  
Må ikke nedsænkes!
3. Steriliser i henhold til Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger".

## Særlige anvisninger i brugen

Placer optikholder Ø 10,0 og 4,0 mm på SynFrame-holdering 387.336

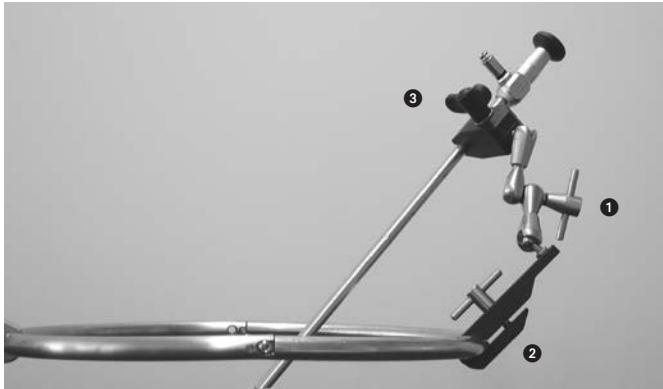

1. For at løsne ledarmen drejes det midterste låsehåndtag (1) mod uret så langt, som det kan komme.
2. Fastgør klemmen (2) på SynFrame-holderingen, mens drejearmen holdes uden for ringen (se billedet). Dette holder holderingen uden for operationsfeltet.
3. Indsæt og fastgør optikken i de tilsvarende 10,0 eller 4,0 mm kæber på holderens sorte klemme (3). Sørg for, at
  - optikken passer præcist ind i 10,0 eller 4,0 mm kæberne på den sorte klemme, og
  - at klemmen er fastgjort på optikkens skaft så langt som muligt i kameraudstyrets retning.
4. Placer optikken i den ønskede position over operationsfeltet, og sæt den fast i denne position ved at stramme det midterste låsehåndtag (1) med uret.

## Bemærkninger:

- Løsn altid det midterste låsehåndtag (1), når optikken omplaceres. Optikken kan beskadiges (bøjes), hvis den bevæges uden at åbne ledarmen.
- Holderen kan beskadiges, hvis der påføres overdreven kraft ved stramning af skrueerne.

## Bemærk:

Optikholder Ø 10,0 og 4,0 mm er en bestanddel af SynFrame-grundsystem 187.310 og er derfor underlagt de tilsvarende betingelser angivet i den kirurgiske teknik for SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
www.depuysynthes.com