
Käyttöohjeet – 387.365 Halkaisijaltaan \varnothing 10,0 ja 4,0 mm:n optiikkavälineiden teline, moniakselinen, SynFrame- perusjärjestelmään

Tätä käyttöohjetta ei ole tarkoitettu
jakeluun Yhdysvalloissa.

Käyttöohjeet –

387.365 Halkaisijaltaan \varnothing 10,0 ja 4,0 mm:n optiikkavälineiden teline, moniakselinen, SynFrame-perusjärjestelmään

Lue ennen käyttöä huolellisesti nämä käyttöohjeet, Synthes-esite ”Tärkeitä tietoja” ja asiaankuuluvat leikkaustekniikat. Tätä tuotetta saa käyttää vain koulutettu lääketieteellinen henkilökunta.

Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata tuotteen tai telineessä olevan optiikkavälineen vaurioituminen ja/tai potilasvamma.

Tuotetta saa käyttää vain sellaisten optiikkavälineiden pitämiseen, joiden varren halkaisija on 10,0 tai 4,0 mm, koska pitovoima ja leuan muoto on suunniteltu yksinomaan tällaisille optiikkavälineille.

Halkaisijaltaan poikkeavien optiikkavälineiden käytöstä seuraa vaurio, ja näin ollen optiikkavälineen turvallinen kiinnitys vaarantuu.

Tuotetta ei toimiteta sterilissä muodossa, ja se on puhdistettava näiden ohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä ja jokaista sitä seuraavaa käyttökertaa. Jotta kiinnitettävä optiikkaväline ei vahingoittuisi, instrumentti on tarkastettava ennen jokaista käyttökertaa vikojen ja häiriöiden varalta.

Materiaali(t)

Materiaali(t):	Standardi(t):
Ruostumaton teräs (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (ruostumaton teräs)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (polyamidi)	DIN 7153-1
Alumiini (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Desinfiointi, puhdistus ja sterilointi

Tuote on puhdistettava huolellisesti ja asianmukaisesti aina käytön jälkeen.

- Höllennä keskuslukituskahva (katso kuvassa nimike 1) ja kaikki varmistusruuvit ennen puhdistusta.
- Puhdista tuotteen pinnat miedoilla puhdistusaineilla tai desinfiointiaineilla, joita suositellaan alumiini-instrumenteille Synthes-esitteessä ”Tärkeitä tietoja”. Ei saa upottaa nesteisiin!
- Steriloi Synthes-esitteessä ”Tärkeitä tietoja” esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Erityiset toimintaohjeet

Aseta halkaisijaltaan \varnothing 10,0 ja 4,0 mm:n optiikkavälineiden teline SynFrame-pidätysrenkaalle 387.336

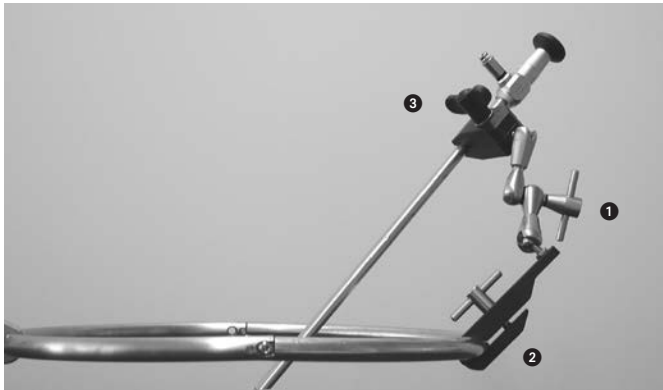

- Höllennä nivelvarsi kiertämällä keskuslukituskahvaa (1) vastapäivään niin pitkälle kuin se menee.
- Kiinnitä puristin (2) SynFrame-pidätysrenkaaseen niin, että kääntövarsi jää renkaan ulkopuolelle (katso kuva). Näin pidätysvarsi pidetään leikkausalueen ulkopuolella.
- Aseta ja kiinnitä optiikkaväline varren halkaisijan mukaisesti telineen mustan puristimen (3) 10,0 tai 4,0 mm:n leukaan. Varmista, että
 - optiikkaväline sopii täydellisesti mustan puristimen 10,0 tai 4,0 mm:n leukaan ja
 - että puristin on kiinnitetty optiikkavälineen varteen niin pitkälle kuin mahdollista asennetun kameran suunnassa.
- Aseta optiikkaväline toivottuun asentoon leikkausalueen yläpuolelle ja kiinnitä se tähän asentoon kiristämällä keskuslukituskahvaa (1) myötäpäivään.

Huomautukset:

- Höllennä keskuslukituskahvaa (1) aina, kun asetat optiikkavälineen uuteen asentoon. Optiikkaväline voi vahingoittua (taipua), jos sitä siirretään ilman nivelvarren avaamista.
- Teline voi vahingoittua, jos ruuvien kiristämiseen käytetään kohtuutonta voimaa.

Huomautus:

Halkaisijaltaan \varnothing 10,0 ja 4,0 mm:n optiikkavälineiden teline on SynFrame-perusjärjestelmän 187.310 olennainen osa, ja sitä koskevat näin ollen vastaavat SynFrame leikkausmenetelmätiedoissa määritellyt ehdot (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com