
Upute za uporabu

387.365 Držać optike Ø 10,0 i 4,0 mm, poliaksijalan, za sustav SynFrame Basic

Ova uputa za uporabu nije namijenjena za
distribuciju u SAD-u.

Upute za uporabu

387.365 Držač optike Ø 10,0 i 4,0 mm, poliaksijalan, za sustav SynFrame Basic
Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, brošuru Sythes „Važne informacije“ i proučite odgovarajuću kiruršku tehniku. Ovaj proizvod smije koristiti samo stručno osposobljeno medicinsko osoblje.

Nepridržavanje ovih uputa za uporabu može za posljedicu imati oštećivanje proizvoda ili optike koja se nosi i/ili ozljeđivanje pacijenta.

Ovaj proizvod smije se koristiti samo kao držač optike promjera osovine od 10,0 ili 4,00 mm, jer su sila držanja i oblik čeljusti dizajnirani isključivo za optiku s navedenim promjerima.

Uporaba optike drugačijih promjera uzrokuje oštećenje, čime se ugrožava sigurno držanje optike.

Proizvod se ne isporučuje sterilan pa bi ga prije prve i svake sljedeće uporabe trebalo očistiti u skladu s ovim uputama. Kako bi se izbjegla oštećenja optike koju je potrebno držati, prije svake uporabe instrument treba provjeriti glede oštećenja i neispravnog funkcioniranja.

Materijal(i)

Materijal(i):	Norma(e):
Nehrdajući čelik (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (nehrdajući čelik)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (poliamid)	DIN 7153-1
Aluminij (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Dezinfekcija, čišćenje i sterilizacija

Proizvod se nakon svake uporabe mora detaljno i temeljito očistiti.

1. Prije čišćenja olabavite središnju ručicu za blokiranje (vidjeti oznaku 1 na ilustraciji) i sve blokirajuće vijke.
2. Površine proizvoda čistite blagim deterdžentima ili sredstvima za dezinfekciju koji su u brošuri Synthes „Važne informacije“ preporučeni za instrumente od aluminija. Nemojte uranjati u tekućine!
3. Sterilizirajte u skladu s uputama u brošuri Synthes „Važne informacije“.

Posebne radne upute

Držač optike Ø 10,0 i 4,0 mm postavite na pričvrсни prsten SynFrame 387.336

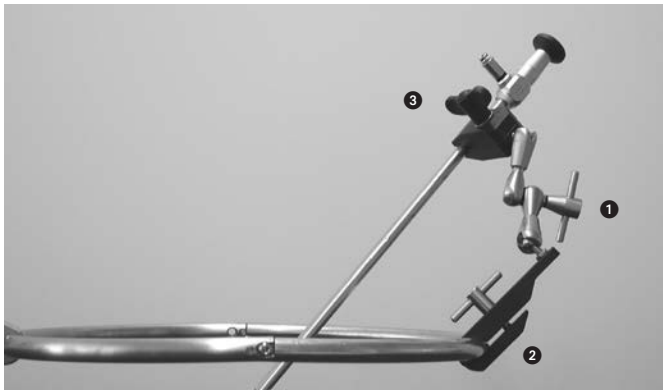

1. Kako biste olabavili spojni krak, središnju ručicu za blokiranje (1) okrenite obrnuto od smjera kazaljke na satu koliko god je moguće.
2. Hvatalku (2) učvrstite na pričvrсни prsten SynFrame, tako da okretni krak ostane s vanjske strane prstena (vidjeti ilustraciju). Time se pričvrсни krak zadržava izvan radnog područja.
3. Optiku umetnite i učvrstite u odgovarajućim čeljustima od 10,0 ili 4,0 mm na crnoj hvataljci (3) na držaču. Pripazite da
 - optika precizno sjeda u čeljust veličine 10,0 ili 4,0 mm na crnoj hvataljci i
 - hvataljka bude učvršćena na osovinu optike što je moguće dalje, u smjeru nastavka za kameru.
4. Optiku postavite na željenu poziciju nad radnim područjem i učvrstite ju stezanjem središnje ručice za blokiranje (1) u smjeru kazaljke na satu.

Napomene

- Pri premještanju optike središnju ručicu za blokiranje (1) uvijek olabavite. Optika se može oštetiti (savinuti) ako se pomiče, a da pritom spojni krak nije otvoren.
- Držač se može oštetiti ako se za zatezanje vijaka primijeni prekomjerna sila.

Napomena:

Držač optike Ø 10,0 i 4,0 mm sastavni je dio sustava SynFrame Basic 187.310, stoga podliježe odgovarajućim uvjetima specificiranim u kirurškim tehnikama za SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com