
Istruzioni per l'uso

387.365 Supporto per sistemi ottici da \varnothing 10,0 e 4,0 mm, poliassiale, per sistema di base SynFrame

Queste istruzioni per l'uso non sono destinate alla distribuzione negli USA.

Istruzioni per l'uso

387.365 Supporto per sistemi ottici da Ø 10,0 e 4,0 mm, poliassiale, per sistema di base SynFrame

Prima dell'utilizzo, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso, l'opuscolo di Synthes «Informazioni importanti» e le tecniche chirurgiche corrispondenti. Il prodotto è utilizzabile solo da personale medico opportunamente formato.

La mancata osservanza di queste Istruzioni per l'uso può comportare danni al prodotto o all'ottica sostenuta e/o lesioni al paziente.

Questo prodotto è utilizzabile unicamente per sostenere ottiche con un diametro dell'asta di 10,0 o 4,0 mm, poiché la forza di sostegno e la conformazione della ganaschia sono progettate esclusivamente per ottiche di questi diametri.

L'uso di ottiche con diametri diversi comporterà danni mettendo a rischio la sicurezza di sostegno dell'ottica.

Il prodotto non è fornito sterile e deve essere pulito in accordo con queste istruzioni prima del primo utilizzo e di ogni utilizzo successivo. Per evitare danni alle ottiche sostenute, ispezionare lo strumento per possibili difetti e malfunzionamenti prima di ogni uso.

Materiale/i

Materiale/i:	Standard:
Acciaio (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (acciaio)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (Poliammide)	DIN 7153-1
Alluminio (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Disinfezione, pulizia e sterilizzazione

Il prodotto deve essere scrupolosamente e interamente pulito dopo ogni utilizzo.

1. Prima di procedere alla pulizia, allentare la manopola centrale di bloccaggio (vedere l'elemento 1 nell'illustrazione) e tutte le viti di bloccaggio.
2. Pulire le superfici del prodotto con un detergente delicato o un disinfettante per l'uso con strumenti in alluminio, raccomandato nell'opuscolo di Synthes «Informazioni importanti». Non immergere!
3. Sterilizzare in conformità con quanto descritto nell'opuscolo di Synthes «Informazioni importanti».

Istruzioni speciali per l'uso

Posizionare il supporto per le sistemi ottici da Ø 10,0 e 4,0 mm sull'anello di fermo SynFrame 387.336

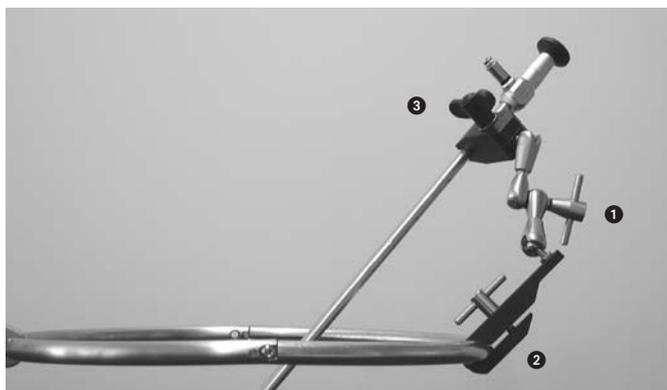

1. Per allentare il braccio articolato, ruotare in senso antiorario la manopola centrale di bloccaggio (1) finché possibile.
2. Fissare il morsetto (2) all'anello di fermo SynFrame tenendo il braccio girevole esterno all'anello (vedere l'illustrazione). In questo modo si tiene il braccio di fissaggio esterno al campo operatorio.
3. Inserire e fissare l'ottica nella ganaschia corrispondente da 10,0 o 4,0 mm sul morsetto nero (3) del sostegno. Accertarsi che:
 - l'ottica si adatti precisamente nella ganaschia da 10,0 o 4,0 mm del morsetto nero e
 - che il morsetto sia fissato all'asta dell'ottica il più lontano possibile in direzione del fissaggio della telecamera.
4. Posizionare l'ottica nella posizione desiderata sopra il campo operatorio e fissarla in questa posizione serrando in senso orario la manopola centrale di bloccaggio (1).

Note:

- Allentare sempre la manopola centrale di bloccaggio (1) quando si modifica la posizione dell'ottica. L'ottica si danneggia (si piega) se viene spostata senza aprire il braccio di articolazione.
- Il supporto può danneggiarsi se si applica una forza eccessiva quando si serrano le viti.

Nota:

il supporto per sistemi ottici da Ø 10,0 e 4,0 mm è un elemento costitutivo del sistema base SynFrame 187.310 ed è pertanto soggetto alle condizioni corrispondenti specificate nella tecnica chirurgica SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com