
Naudojimo instrukcija

387.365 Ø 10,0 ir 4,0 mm optinių įtaisų laikiklis, daugiaašis, skirtas „SynFrame“ bazinei sistemai

Ši naudojimo instrukcija neskirta
platinti JAV.

Naudojimo instrukcija

387.365 Ø 10,0 ir 4,0 mm optinių įtaisų laikiklis, daugiaašis, skirtas „SynFrame“ bazinei sistemai

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, „Synthes“ brošiūrą „Svarbi informacija“ ir atitinkamų chirurginių metodų aprašą. Šį gaminį leidžiama naudoti tik kvalifikuotiems medicinos darbuotojams.

Nesilaikant šių naudojimo instrukcijų, gali būti sugadintas gaminys arba įtvirtintas optinis įtaisas ir (arba) sužalotas pacientas.

Šį gaminį galima naudoti tik optiniams įtaisams, kurių kotelio skersmuo yra 10,0 arba 4,0 mm, laikyti, nes laikymo jėga ir žnyplių forma pritaikytos tik šių skersmenų optiniams įtaisams.

Jei bus naudojamas kitokio skersmens optinis įtaisas, atsiras pažeidimas, todėl kils pavojus patikimam optinio įtaiso įtvirtinimui.

Gaminys pateikiamas nesterilus, todėl jį reikia nuvalyti pagal šias instrukcijas, prieš naudojant pirmą ir kitus kartus. Kaskart prieš naudojant reikia patikrinti, ar instrumente nėra defektų ir ar jis tinkamai veikia, kad nebūtų sugadintas optinis įtaisas, kurį ketinama įtvirtinti.

Medžiaga (-os)

Medžiaga (-os):	Standartas (-ai):
Nerūdijantysis plienas (SS)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ ISO 7153-1
„Nitronic 60“ (nerūdijantysis plienas)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (poliamidas)	DIN 7153-1
Aliuminis (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Dezinfekavimas, valymas ir sterilizavimas

Kaskart panaudojus gaminį reikia kruopščiai ir tinkamai nuvalyti.

1. Prieš valydami atlaisvinkite centrinę užfiksavimo rankenėlę (žr. 1 elementą iliustracijoje) ir visus fiksavimo varžtus.
2. Nuvalykite gaminio paviršius, naudodami švelnius ploviklius arba dezinfekantus, kurie rekomenduojami aliumininiam instrumentams „Synthes“ brošiūroje „Svarbi informacija“. Nepanardinkite!
3. Sterilizuokite vadovaudamiesi „Synthes“ brošiūra „Svarbi informacija“.

Specialūs naudojimo nurodymai

Uždėkite Ø 10,0 ir 4,0 mm optinių įtaisų laikiklį ant „SynFrame“ laikančiojo žiedo 387.336.

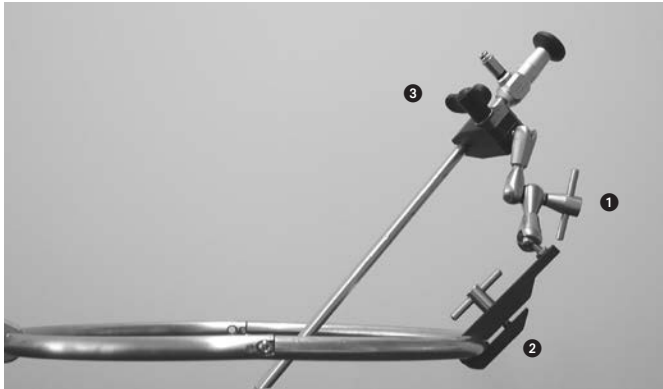

1. Iki galo pasukite centrinę užfiksavimo rankenėlę (1) prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte lanksto svirtį.
2. Pritvirtinkite spaustuvą (2) ant „SynFrame“ laikančiojo žiedo taip, kad lankstinė svirtis būtų žiedo išorėje (žr. iliustraciją). Taip pritvirtinus, laikančioji svirtis bus už operacinio lauko ribų.
3. Įkiškite optinį įtaisą į atitinkamas 10,0 arba 4,0 mm žnyples, esančias juodame laikiklio spaustuve (3), ir įtvirtinkite. Įsitinkite, kad:
 - optinis įtaisas tiksliai įsistatė į 10,0 arba 4,0 mm juodo spaustuvo žnyples;
 - spaustuvas visiškai pritvirtintas prie optinio įtaiso kotelio vaizdo kameros tvirtinimo kryptimi.
4. Nustatykite optinį įtaisą į reikiamą padėtį virš operacinio lauko ir įtvirtinkite šioje padėtyje, prisukdami centrinę fiksavimo rankenėlę (1) pagal laikrodžio rodyklę.

Pastabos

- Keisdami optinio įtaiso padėtį, visada atlaisvinkite centrinę fiksavimo rankenėlę (1). Jei optinis įtaisas stumiamas neatvėrus lanksto svirties, jis gali būti sugadintas (sulenkta).
- Varžtus veržiant per didelę jėgą, galima sugadinti laikiklį.

Pastaba

Ø 10,0 ir 4,0 mm optinių įtaisų laikiklis yra „SynFrame“ bazinės sistemos 187.310 sudedamoji dalis, todėl jam taikomos sąlygos, nurodytos „SynFrame“ chirurginio metodo apraše (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com