
Bruksanvisning

387.365 Holder for Optics Ø 10,0 og 4,0 mm, polyaksial, for SynFrame grunnleggende system

Denne bruksanvisningen er ikke ment for
distribusjon i USA.

Bruksanvisning

387.365 Holder for Optics Ø 10,0 og 4,0 mm, polyaksial, for SynFrame grunnleggende system

Les denne bruksanvisningen, Synthes "Viktig informasjon" og korresponderende kirurgisk teknikk nøye før bruk. Dette produktet skal kun brukes av opplært medisinsk personell.

Hvis man ikke følger disse instruksjonene kan det føre til skade på produktet eller optikken og/eller skade på pasienten.

Dette produktet skal kun brukes for å holde optikk med en håndtaksdiameter på 10,0 eller 4,0 mm, ettersom holdekraften og kjeveformen er designet eksklusivt for optikk med disse diameterne.

Bruk av optikk med forskjellige diameterer vil føre til skade, og dermed hindre sikker holding av optikken.

Produktet leveres ikke i steril form og må rengjøres i henhold til disse instruksjonene før første gangs bruk og før hver påfølgende gangs bruk. For å unngå skade på optikken som skal holdes må instrumentet sjekkes for defekter og feilfunksjon før hver gangs bruk.

Materiale(r)

Materiale(r):	Standard(er):
Rustfritt stål (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (Rustfritt stål)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (Polyamid)	DIN 7153-1
Aluminium (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering

Produktet må rengjøres grundig og riktig etter hver gangs bruk.

1. Løsne det sentrale låsehåndtaket (se element 1 på bildet) og alle låseskruer før rengjøring.
2. Rengjør overflatene på produktet med milde rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler som er anbefalt for aluminiumsinstrumenter i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon". Må ikke nedsenkes!
3. Steriliser i henhold til Synthes-brosjyren "Viktig informasjon".

Spesielle betjeningsinstruksjoner

Plasser holderen for Optics Ø 10,0 og 4,0 mm på SynFrame-holderingen 387.336

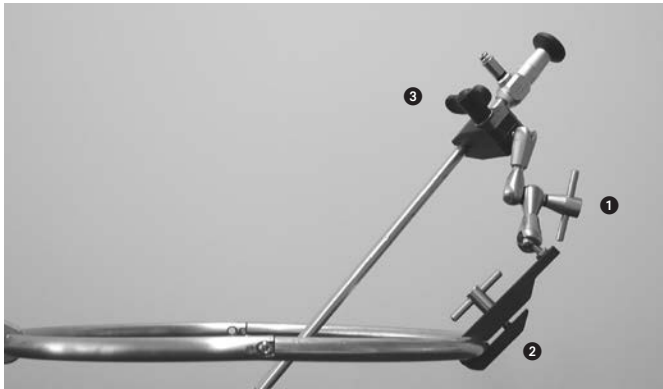

1. For å løsne leddarmen må du vri det sentrale låsehåndtaket (1) mot klokken så langt det går.
2. Sikre klemmen (2) til SynFrame-holderingen, hold svivelarmen utenfor ringen (se illustrasjonen). Dette holder holdearmen utenfor betjeningsfeltet.
3. Sett inn og sikre optikken i den korresponderende 10,0 eller 4,0 mm kjeven på den svarte klemmen (3) på holderen. Kontroller at
 - optikken passer nøye inn i 10,0 eller 4,0 mm kjeven på den svarte klemmen og
 - klemmen sikres til håndtaket på optikken så langt som det er mulig i retning av kamerafestet.
4. Plasser optikken i ønsket posisjon over betjeningsfeltet og sikre i denne posisjonen ved å stramme det sentrale låsehåndtaket (1) med klokken.

Merknader:

- Løsne alltid det sentrale låsehåndtaket (1) når du flytter optikken. Den optiske armen kan skades (bøyes) hvis den flyttes uten å åpne leddarmen.
- Holderen kan bli skadet hvis man bruker for mye kraft når man strammer skruene.

Merknad:

Holderen for Optics Ø 10,0 og 4,0 mm er en del i SynFrame grunnleggende system 187.310 og er derfor underlagt de korresponderende forholdene som er spesifisert i den kirurgiske teknikken for SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com