
Instrukcja stosowania

Uchwyt 387.365 na optykę \varnothing 10,0 i 4,0 mm, wieloosiowy, do systemu podstawowego SynFrame

Niniejsza instrukcja stosowania nie jest przeznaczona do dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Instrukcja stosowania

Uchwyt 387.365 na optykę \varnothing 10,0 i 4,0 mm, wieloosiowy, do systemu podstawowego SynFrame

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję stosowania, dokument „Ważne informacje” firmy Synthes oraz odpowiednie techniki operacyjne. Niniejszy produkt może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny.

Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji stosowania może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub optyki przeznaczonej do umieszczenia w uchwycie i/lub obrażeń pacjenta.

Niniejszy produkt może być używany do mocowania optyki o średnicy trzonu wynoszącej 10,0 lub 4,0 mm, ponieważ siła uchwytu i kształt szczęki zostały zaprojektowane wyłącznie do optyki o tych średnicach.

Użycie optyki o innej średnicy doprowadzi do uszkodzeń, naruszając bezpieczeństwo mocowania optyki.

Produkt nie jest dostarczany w postaci sterylnej i należy go wyczyścić zgodnie z niniejszymi instrukcjami przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem. Aby uniknąć uszkodzenia mocowanej optyki, narzędzie należy przed każdym użyciem sprawdzić pod uszkodzeń i awarii.

Materiał(y)

Materiał(y):	Norma(y):
Stal nierdzewna (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (stal nierdzewna)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (poliamid)	DIN 7153-1
Aluminium (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Dezynfekcja, czyszczenie i sterylizacja

Po każdym użyciu produkt należy dokładnie i właściwie wyczyścić.

1. Przed czyszczeniem należy poluzować centralny uchwyt blokujący (patrz pozycja 1 na ilustracji) i wszystkie wkręty blokujące.
2. Wyczyścić powierzchnie produktu przy użyciu łagodnych detergentów lub środków dezynfekujących zalecanych do narzędzi z aluminium, zgodnie z dokumentem „Ważne informacje” firmy Synthes. Nie zanurzać!
3. Sterylizować zgodnie z dokumentem „Ważne informacje” firmy Synthes.

Specjalne instrukcje dotyczące obsługi

Ustawić uchwyt na optykę \varnothing 10,0 i 4,0 mm na pierścieniu mocującym SynFrame 387.336

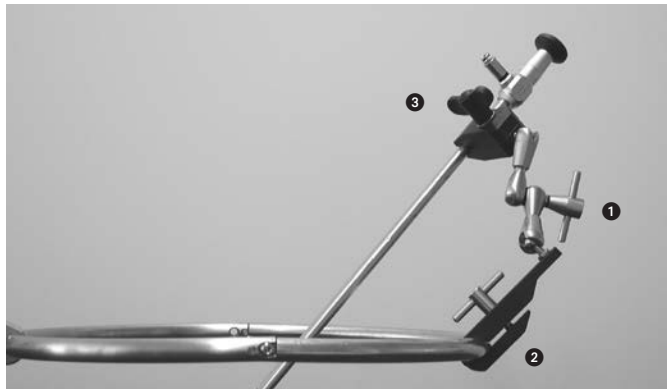

1. Aby poluzować ramię połączenia, należy obrócić środkowy uchwyt blokujący (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do oporu.
2. Przymocować zacisk (2) do pierścienia mocującego SynFrame, utrzymując obrotowe ramię poza pierścieniem (patrz ilustracja). Dzięki temu ramię mocujące pozostaje poza polem operacyjnym.
3. Włożyć i przymocować optykę w odpowiednią szczękę 10,0 lub 4,0 mm w czarnym zacisku (3) uchwytu. Należy upewnić się, że
 - optyka jest precyzyjnie dopasowana do szczęk o średnicy 10,0 lub 4,0 mm w czarnym zacisku, a
 - zacisk został przymocowany do trzonu optyki w pozycji możliwie najbliższej punktowi mocowania kamery.
4. Ustawić optykę w żądanej pozycji nad polem operacyjnym i zabezpieczyć w tej pozycji poprzez dokręcenie środkowego uchwytu blokującego (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Uwagi:

- Przed zmianą położenia optyki należy zawsze poluzować środkowy uchwyt blokujący (1). Jeśli ramię połączenia nie zostanie otwarte, poruszenie optyką może doprowadzić do jej uszkodzenia (wygięcia).
- Uchwyt może ulec uszkodzeniu w przypadku użycia nadmiernej siły podczas dokręcania śrub.

Uwaga:

Uchwyt na optykę \varnothing 10,0 i 4,0 mm to część składowa podstawowego systemu SynFrame 187.310 i z tego względu podlega odpowiednim warunkom określonym w technice operacyjnej dla systemu SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Szwajcaria
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com