

---

## Návod na použitie

# 387.365 Držiak pre optické súčasti s priermi 10,0 a 4,0 mm, polyaxiálny, pre základný systém SynFrame

Tento návod na použitie nie je určený na distribúciu v USA.

# Návod na použitie

387.365 Držiak pre optické súčasti s priermi 10,0 a 4,0 mm, polyaxiálny, pre základný systém SynFrame

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie, brožúru spoločnosti Synthes Dôležité informácie a návod k príslušným chirurgickým technikám. Tento produkt smú používať len vyškolení zdravotnícki pracovníci.

Nedodržanie tohto návodu na použitie môže viesť k poškodeniu produktu alebo optických súčastí, ktoré má držať, a/alebo k poraneniu pacienta.

Tento produkt sa smie používať len na držanie optických súčastí s priemerom tela 10,0 alebo 4,0 mm, keďže sila držania a tvar čeluste boli navrhnuté výlučne pre optické súčasti s týmito priermi.

Použitie optických súčastí s inými priermi bude viesť k poškodeniu, a tým k ohrozeniu bezpečného držania optickej súčasti.

Produkt sa nedodáva sterilný a pred prvým a každým nasledujúcim použitím by sa mal vyčistiť v súlade s týmto návodom. Nástroj by sa mal pred každým použitím skontrolovať, či neobsahuje defekty a či nie je narušená jeho funkcia, aby nedošlo k poškodeniu optických súčastí, ktoré má držať.

## Materiál(-y)

Materiál(-y):	Norma(-y):
Nehrdzavajúca oceľ (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (nehrdzavajúca oceľ)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (polyamid)	DIN 7153-1
Alumínium (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


## Dezinfekcia, čistenie a sterilizácia

Produkt sa po každom použití musí dôkladne a riadne vyčistiť.

1. Pred čistením uvoľnite stredovú uzamykáciu kľuku (pozri položku 1 na ilustrácii) a všetky uzamykacie skrutky.
2. Očistite plochy produktu miernymi detergentmi alebo dezinfekčnými prostriedkami odporúčanými pre hliníkové nástroje v brožúre spoločnosti Synthes Dôležité informácie. Neponárajte!
3. Sterilizujte podľa brožúry spoločnosti Synthes Dôležité informácie.

## Osobitné pokyny pre obsluhu

Umiestnite držiak pre optické súčasti s priermi 10,0 a 4,0 mm na zaistovací kruh SynFrame 387.336

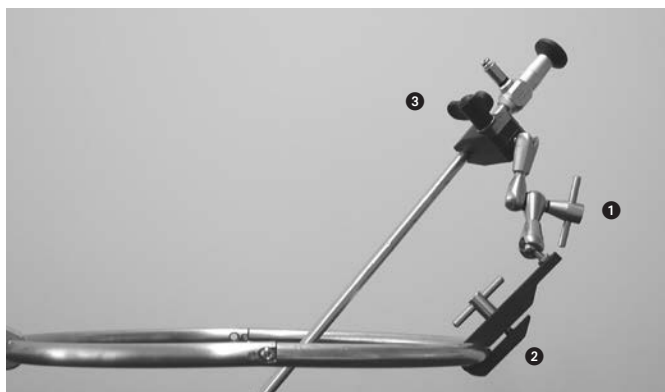

1. Uvoľnite kľbové rameno tak, že stredovú uzamykáciu kľuku (1) čo najviac otočíte proti smeru hodinových ručičiek.
2. Upevnite svorku (2) na zaistovací kruh SynFrame, s otočným ramenom mimo kruhu (pozri ilustráciu). Tak zostane zaistovacie rameno mimo operačného poľa.
3. Zasuňte a zaistíte optickú súčasť do zodpovedajúcej 10,0 mm alebo 4,0 mm čeluste na čiernej svorke (3) držača. Presvedčte sa, že:
  - optická súčasť presne pasuje do 10,0 mm alebo 4,0 mm čeluste čiernej svorky a že
  - svorka je upevnená k telu optickej súčasti čo najďalej v smere pripojenia kamery.
4. Umiestnite optickú súčasť do požadovanej polohy nad operačným poľom a zaistíte ju v tejto polohe utiahnutím stredovej uzamykacej kľuky (1) v smere hodinových ručičiek.

## Poznámky:

- Keď meníte polohu optickej súčasti, vždy uvoľnite stredovú uzamykáciu kľuku (1). Pri pohnutí optickou súčasťou bez otvorenia kľbového ramena môže dôjsť k jej poškodeniu (ohnutiu).
- V prípade vyvinutia nadmernej sily pri uťahovaní skrutiek sa držiak môže poškodiť.

## Poznámka:

Držiak pre optické súčasti s priermi 10,0 a 4,0 mm je súčasťou základného systému SynFrame 187.310 a preto sa naň vzťahujú zodpovedajúce podmienky uvedené v návode k chirurgickej technike pre systém SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
www.depuyssynthes.com