
Uputstvo za upotrebu 387.365 Držać za optiku \varnothing 10,0 i 4,0 mm, poliaksijalni, za SynFrame osnovni sistem

Ovo uputstvo za upotrebu nije namenjeno za distribuciju u SAD.

Uputstvo za upotrebu

387.365 Držač za optiku Ø 10,0 i 4,0 mm, poliaksijalni, za SynFrame osnovni sistem
Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, brošuru Synthes
„Važne informacije“ i odgovarajući Vodič za hirurške tehnike. Ovaj proizvod sme
da koristi isključivo obučeno medicinsko osoblje.

Nepoštovanje ovih uputstava za upotrebu može dovesti do oštećenja proizvoda
ili optike koju treba držati i/ili do povrede pacijenta.

Ovaj proizvod sme da se koristi isključivo za držanje optike prečnika tela 10,0 ili
4,0 mm jer su sila držanja i oblik čeljusti projektovani isključivo za optiku ovih
prečnika.

Upotreba optike drugih prečnika dovešće do oštećenja, čime se ugrožava bezbedno
držanje optike.

Proizvod se ne isporučuje u sterilnom stanju i potrebno je da se očisti u skladu sa
ovim uputstvima pre prve i svake naredne upotrebe. Da bi se izbeglo oštećenje
optike koju treba držati, instrument treba proveravati zbog nedostataka i kvara
pre svake upotrebe.

Materijal(i)

Materijal(i):	Standard(i):
Nerđajući čelik (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (nerđajući čelik)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (poliamid)	DIN 7153-1
Aluminijum (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Dezinfekcija, čišćenje i sterilizacija

Proizvod mora temeljno i pravilno da se čisti nakon svake upotrebe.

1. Pre čišćenja otpustite centralnu dršku za zaključavanje (pogledajte stavku 1 na slici)
i sve zavrtnje za zaključavanje.
2. Očistite sve površine proizvoda blagim deterdžentima ili sredstvima za
dezinfekciju koja su preporučena za aluminijumske instrumente u Synthes
brošuri „Važne informacije“. Ne potapajte!
3. Sterilizirajte u skladu sa Synthes brošurou „Važne informacije“.

Specijalna uputstva za rukovanje

Postavite držač za optiku Ø 10,0 i 4,0 mm na SynFrame držeći prsten 387.336

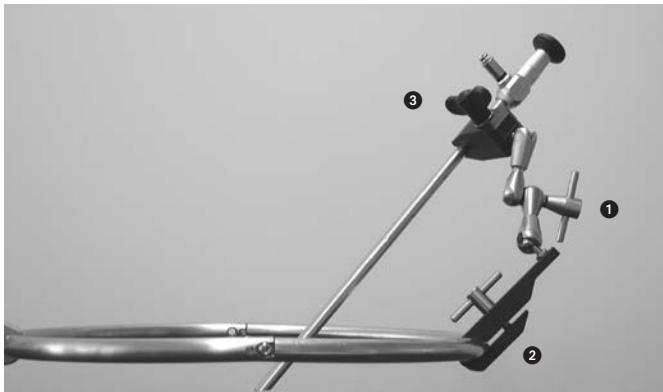

1. Da biste otpustili zglobni krak, okrenite centralnu ručku za zaključavanje (1) u
smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu dok se ne zaustavi.
2. Pričvrstite stegu (2) za SynFrame držeći prsten tako da pokretna ruka bude izvan
prstena (pogledajte sliku). Time se držeći prsten zadržava izvan operativnog polja.
3. Umetnite i pričvrstite optiku u odgovarajuću čeljust od 10,0 ili 4,0 mm na crnoj
stezi (3) na držaču. Osigurajte da
– optika precizno nalegne u čeljust od 10,0 ili 4,0 mm na crnoj stezi i da
– stega bude pričvršćena za telo optike što je dalje moguće u smeru priključka
za kameru.
4. Postavite optiku u željeni položaj preko operativnog polja i pričvrstite je u ovom
položaju tako što ćete zategnuti centralnu ručku za zaključavanje (1) u smeru
kretanja kazaljki na satu.

Napomene:

- Uvek otpustite centralnu bravu za zaključavanje (1) kada menjate položaj optike.
Optika se može oštetiti (saviti) ako se pomeri bez otvaranja zglobnog kraka.
- Držač se može oštetiti ako se primeni prekomerna sila prilikom zatezanja
zavrtnja.

Napomena:

Držač za optiku Ø 10,0 i 4,0 mm je sastavni deo SynFrame osnovnog sistema
187.310 i stoga podleže odgovarajućim uslovima naznačenim u hirurškoj tehnici
za SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com