
Bruksanvisning

387.365 Hållare för optik Ø 10,0 och 4,0 mm, polyaxiell, för SynFrame bassystem

Denna bruksanvisning är inte avsedd för
distribution i USA.

Bruksanvisning

387.365 Hållare för optik Ø 10,0 och 4,0 mm, polyaxiell, för SynFrame bassystem
Läs bruksanvisningen, broschyren "Viktig information" från Synthes och motsvarande guide för kirurgisk teknik noga innan användning. Denna produkt får endast användas av utbildad sjukvårdspersonal.

Om inte denna bruksanvisning följs kan det leda till att produkten eller den optik som ska hållas och/eller att patienten skadas.

Denna produkt får endast användas för att hålla optik med en skaftdiameter på 10,0 eller 4,0 mm, eftersom den hållande kraften och käftens form är utformade enbart för optik med en diameter av dessa storlekar.

Att använda optik med andra diameterstorlekar leder till skador, och därmed hålls optiken inte på ett säkert sätt.

Produkten levereras inte i sterilt skick och ska rengöras enligt dessa anvisningar före den första och alla därpå följande användningar. För att undvika att skada optiken som ska hållas ska instrumentet kontrolleras för att upptäcka om det är defekt eller inte fungerar som det ska före varje användning.

Material

Material:	Standard(er):
Rostfritt stål	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM 276/ISO 7153-1
Nitronik 60 (rostfritt stål)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (polyamid)	DIN 7153-1
Aluminium (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Desinfektion, rengöring och sterilisering

Produkten ska rengöras noga och på korrekt sätt efter varje användning.

1. Lossa på låshandtaget i mitten (se nr 1 på bilden) och alla låsskruvar före rengöring.
2. Rengör produktens ytor med milda rengöringsmedel eller desinfektionsmedel som rekommenderas för aluminiuminstrument i Synthes broschyr "Viktig information". Får inte nedsänkas i vätska!
3. Sterilisera enligt Synthes broschyr "Viktig information".

Särskilda användningsinstruktioner

Placera hållaren för optik Ø 10,0 och 4,0 mm på SynFrames stoppring 387.336

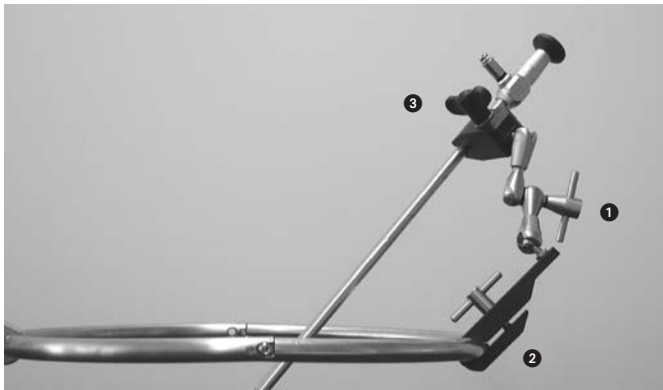

1. Vrid låshandtaget i mitten (1) moturs så långt det går för att lossa på den ledade armen.
2. Spänn klämman (2) på SynFrames stoppring och håll svängarmen utanför ringen (se bild). Detta håller stopparmen utanför operationsfältet.
3. Sätt i och spänn fast optiken i motsvarande käft för 10,0 eller 4,0 mm på den bakre klämman (3) på hållaren. Säkerställ att
 - optiken passar exakt i käften på 10,0 eller 4,0 mm på den bakre klämman och
 - att klämman sitter fast på optikskäftet så långt som möjligt i kameratillsatsens riktning.
4. Placera optiken i önskad riktning över operationsfältet och spänn fast i detta läge genom att dra åt låshandtaget i mitten (1) medurs.

Obs!

- Lossa alltid på låshandtaget i mitten (1) när optiken placeras om. Optiken kan skadas (böjas) om den rörs utan att den ledade armen öppnas.
- Hållaren kan skadas om för stark kraft används när skruvarna spänns åt.

Obs!

Hållaren för optik Ø 10,0 och 4,0 mm är en beståndsdel i SynFrame bassystem 187.310 och därför lyder den under de tillhörande villkor som anges i guiden för kirurgisk teknik för SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com