
Kullanım Talimatları

387.365 Tutucu, Optikler için, Çap 10,0 ve 4,0 mm, poliaksiyal, SynFrame Temel Sistemi için

Bu kullanım talimatları
ABD'de dağıtılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kullanım Talimatları

387.365 Tutucu, Optikler için, Çap 10,0 ve 4,0 mm, poliaksiyal, SynFrame Temel Sistemi için
Kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatlarını, Synthes broşürü "Önemli Bilgiler"i ve ilgili cerrahi teknikleri dikkatle okuyun. Bu ürün, sadece eğitimli tıbbi personel tarafından kullanılmalıdır.

Bu kullanım talimatlarına uyulmaması, ürüne veya tutulacak optiğe hasar verebilir ve/veya hastanın yaralanmasına neden olabilir.

Tutma kuvveti ve çene şekli bu çaplara sahip optikler için özel olarak tasarlandığı için, bu ürün sadece 10,0 veya 4,0 mm şaft çapına sahip optikleri tutmak için kullanılmalıdır.

Farklı çaplardaki optiklerin kullanılması hasara neden olacak ve dolayısıyla optiğin güvenli şekilde tutulmasını tehlikeye atacaktır.

Ürün, steril halde tedarik edilmez, ilk ve her kullanımdan önce bu talimatlara uygun olarak temizlenmelidir. Tutulacak optiklerin hasar görmesinden kaçınmak için, her kullanımdan önce alet kusurlar ve kusurlu çalışma bakımından kontrol edilmelidir.

Materyal(ler)

Materyal(ler):	Standart(lar):
Paslanmaz Çelik (SSt)	ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1
Nitronik 60 (Paslanmaz Çelik)	ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (Polyamid)	DIN 7153-1
Alüminyum (Al)	ASTM B 221M/ISO DIN 573


Dezenfeksiyon, temizlik ve sterilizasyon

Ürün, her kullanımdan önce tamamen ve doğru şekilde temizlenmelidir.

1. Temizlemeden önce, merkezi kilitleme manivelasını (resimdeki madde 1'e bakın) ve bütün kilitleme vidalarını gevşetin.
2. Synthes Broşürü "Önemli Bilgiler" içinde yer alan alüminyum aletler için önerilen yumuşak deterjanlar veya dezenfektanlar ile ürünün yüzeylerini temizleyin. Suya batırmayın!
3. Synthes broşürü "Önemli Bilgiler"e göre sterilize edin.

Özel çalıştırma talimatları

Optikler için Tutucu, Çap 10,0 ve 4,0 mm'yi SynFrame Tutturma Halkası 387.336'ya yerleştirin

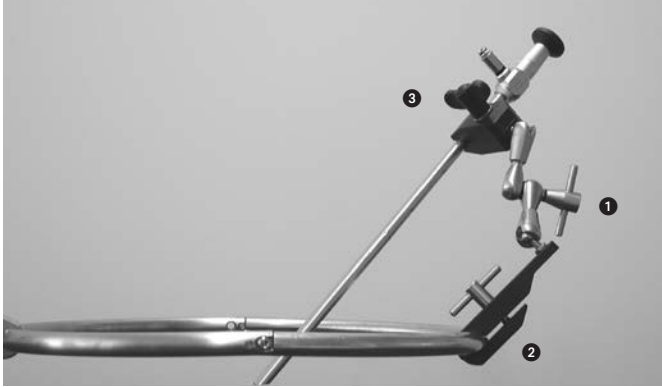

1. Eklem kolunu gevşetmek için, merkezi kilitleme manivelasını (1) gittiği yere kadar saat yönünün tersine doğru döndürün.
2. Döner kolu halkanın dışında tutarak klempin (2) SynFrame tutturma halkasına sabitleyin (resme bakın). Bu işlem, tutturma kolunu çalışma alanının dışında tutar.
3. Optiği, tutucunun siyah klempinin (3) üzerindeki ilgili 10,0 veya 4,0 mm'lik çeneye yerleştirin ve sabitleyin. Aşağıdakilerden emin olun:
 - optiğin siyah klempin 10,0 veya 4,0 mm'lik çenesine tam oturduğundan ve
 - klempin, optik şaftına, kamera ataşmanının yönünde, mümkün olduğunca uzağa sabitlendiğinden.
4. Optiği çalışma alanında istenen konuma getirin ve merkezi kilitleme manivelasını (1) saat yönünde sıkarak bu konumu sabitleyin.

Notlar:

- Optiği yeniden konumlandırırken, her zaman merkezi kilitleme manivelasını (1) gevşetin. Eklem kolu açılmadan hareket ettirilirse, optik hasar görebilir (bükülebilir).
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması durumunda tutucu hasar görebilir.

Not:

Optikler için tutucu, Çap 10,0 ve 4,0 mm, SynFrame Temel Sistem 187.310'un bir bileşenidir ve bu nedenle SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530) için cerrahi tekniğinde belirtilen ilgili koşullara tabidir.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com